


COPROCULTIVOS

1. RECOGIDA

- Recoger en la fase aguda de la enfermedad. Aproximadamente 5 ml. Y si son formes entre 0,5-2 g de muestra.
- Deberá recogerse en un contenedor estéril de boca ancha y cierre hermético con cucharilla.

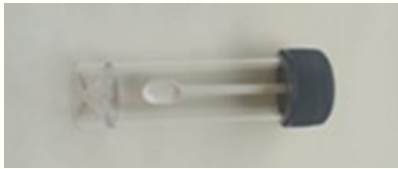

2. TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN

- El transporte de las heces se debe hacer lo más pronto posible para su procesamiento antes de las dos horas.
- Si esto no es posible, se recomienda utilizar un medio de transporte como el de Cary-Blair y mantener refrigeradas a 4°C.

Importante: Evitar la contaminación con restos de orina, sales de bario o papel higiénico.

3. CLOSTRIDIODES DIFFICILE

- En heces no formes.
- En pacientes con íleo paralítico que no realizan deposiciones se puede obtener la muestra mediante hisopado rectal.
- Recoger una única muestra durante un mismo episodio.
- No se debe enviar una nueva muestra de control como test de curación.

4. PARÁSITOS

- 3 muestras preferentemente en días no consecutivos.
- Evitar sustancias que dificulten la visualización de protozoos como laxantes oleosos o antipalúdicos.
- Fundamental indicar el contexto geográfico del paciente.

ENVIAR A MICROBIOLOGÍA: TUBO NEUMÁTICO Nº 103 O 538